



CHROMOPTIC

La Maison des Services - Avenue des 2 lacs
ZAC de Villejust
91971 COURTABOEUF Cedex



www.chromoptic.com




contact@chromoptic.com



01.69.31.41.65

Membranes filtrantes MCE - Esters de cellulose mixtes CC047ME045GS (CHROMOPTIC)

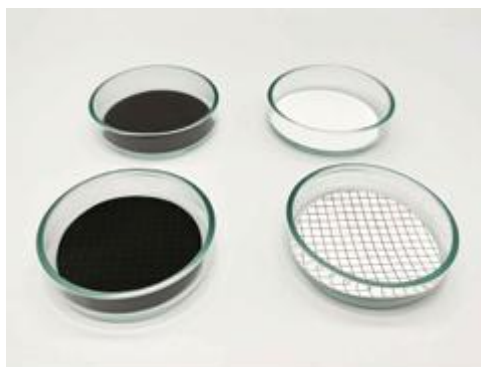

Gamme :	FILTRAE®
Débit (mL/min/cm²@10psi) :	38-71
Porosité (µm) :	0.45
Point de bulle (psi) :	29-40
Dimension (mm) :	47
Conditionnement :	Paquet de 100
Couleur:	Blanc

Les membranes en MCE sont fabriquées avec des fibres d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose ; elles sont naturellement hydrophiles, mécaniquement stables et ont une grande capacité de charge. Elles conviennent pour l'analyse microbiologique, pour le comptage de colonies ou pour la préfiltration et la clarification d'échantillons.